


▶ ASTUS

Armoires sécurisées

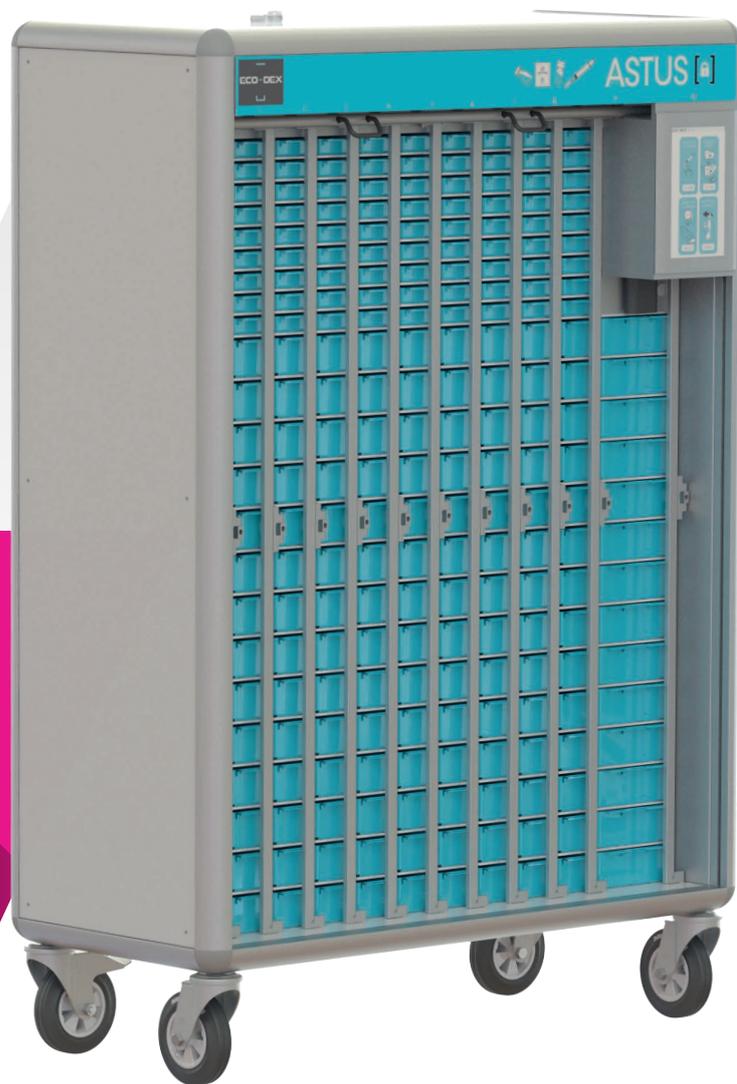

PRATICIMA
healthcare solutions

► Stocker, sécuriser et tracer la dispensation des médicaments de toutes formes

- Armoire sécurisée dédiée à la PUI ou aux UF
- Accès 24h/24, à tous types de médicaments y compris sous forme injectable
- Garantit la traçabilité même dans des services aussi sensibles que ceux des urgences et facilite la gestion des stocks
- Gestion en mode plein/vide
- Configuration selon les besoins des services où elle est installée, avec plusieurs niveaux de sécurité
- Capacité de stockage jusqu'à 244 bacs, tous en plein/vide soit 488 bacs de stock maximum
- 244 références de médicaments tracées unitairement



SÉCURISER ET TRACER Améliorer l'observance médicamenteuse

- Meilleure traçabilité des médicaments
- Diminution des risques d'erreurs produits liés à des process manuels
- Information instantanée sur les activités

- + 2 niveaux différents d'autorisations possibles
- + Tous les emplacements de stockage sont surveillés par un rideau de détecteurs
- + Accès par code ou badge, badge RFID ou lecteur d'empreinte en option
- + Option pour sécuriser les produits stupéfiants

Sécurité maximale
« alerte INTRUSION »

- Traçage des mouvements sur les bacs
- Verrouillage mécanique des volets rotatifs
- Écran d'alerte
- Signal sonore




STOCKER ET GÉRER Optimiser la gestion des stocks

- Gestion en mode plein/vide
- Gestion des périmés et des retraits de lots
- Contrôle des budgets
- Bacs de 5 contenances, 3^{ème} jeu de bac pour préparer le réassort à la pharmacie

3 modes de distribution pour prendre en compte les besoins réels de tous les services

- + Distribution d'un produit à la demande
- + Compléter un pilulier nominatif déjà préparé
- + Cueillette assistée :
 - Préparer des piluliers par patient
 - Préparer des bacs par moment
 - Préparer des bacs à partir d'une prescription

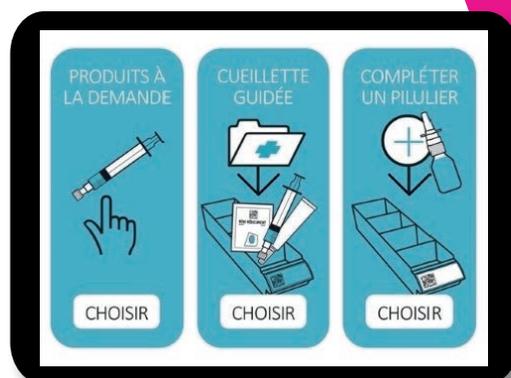

La réponse aux attentes des établissements de santé



TRAÇABILITÉ

Identification de l'utilisateur



EFFICIENCE

Indication des emplacements par LED



MODULARITÉ

5 formats de bacs pour stocker toutes formes de médicaments



CONVIVALITÉ

Écran tactile intuitif



SÉCURITÉ

Système de verrouillage par volets



HYGIÈNE


Armoire mobile

► Les options



Accès par badge RFID ou lecteur d'empreinte

Identification de l'utilisateur.

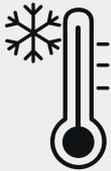

Frigo solidaire de l'armoire

Pour conserver les médicaments au frais.
Verrouillage électromécanique, piloté par code sur l'écran.



Produit stupéfiant

Volet d'interdiction d'accès aux bacs pour la sécurisation
des produits stupéfiants.
Ce volet est indépendant du volet de fermeture.



Bon de livraison

Impression des bons de livraison correspondant
aux cueillettes réalisées par l'utilisateur.

► Services



- Hot-line
- Prise en main
à distance de l'armoire
- Maintenance préventive



PRATICIMA
healthcare solutions

Rue du Pou du Ciel
ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux
01600 TRÉVOUX – FRANCE
Tél : 04 74 00 98 11 – Fax : 04 74 00 98 36
E-mail : praticima@praticima.fr

www.praticima.fr

