

Hygiène bucco-dentaire

Système de nettoyage pour prothèses dentaires C2S PRO®

Le système C2S PRO® vise à l'amélioration des soins bucco-dentaires au sein des établissements de santé. Il permet une **baisse significative des bactéries ainsi que des champignons** (candidoses), limitant ainsi certaines pathologies systémiques (pathologie des voies aériennes supérieures). C2S PRO® est conçu pour le **nettoyage quotidien et curatif de tous types de prothèses dentaires amovibles et transvissées**. Par brossage dynamique avec des aiguillettes d'alliage spécial, il contribue à la pérennisation des prothèses dentaires en prévenant la formation de plaque dentaire et de tartre.



Hygiénique



Ergonomique

Points forts

- ▶ Simple et efficace
- ▶ Contribue à la pérennisation des prothèses dentaires
- ▶ Prévient la formation de plaque dentaire et de tartre
- ▶ Limite le recours à des spécialistes (dentistes, prothésistes dentaires...)

Hygiène bucco-dentaire

Système de nettoyage pour prothèses dentaires C2S Pro®

Système de nettoyage pour prothèses dentaires

- ▶ Dim : L. 20 x l. 17,5 x H. 19,5 cm
- ▶ Lavage : mise en rotation d'aimants à 1800 rpm
- ▶ Timing : 2 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min
- ▶ Arrêt automatique du système en cas d'inactivité prolongée
- ▶ Homologation : CE
- ▶ Alimentation : transformateur séparé norme CE, input : 100-240 V / output : 12 V
- ▶ Garantie : 2 ans



Désignation

Référence

Système de nettoyage C2S PRO®

2CPRO

Batterie amovible

- ▶ Type : Lithium Polymère
- ▶ Dimensions : 19,4 x 12 x 2,1 cm
- ▶ Couleur : gris argent
- ▶ Signalisation : LED bleues
- ▶ Autonomie : 7 h
- ▶ Alimentation INPUT : 19 V / 1,2 A
- ▶ Alimentation OUTPUT :
 - DC 12 V / 2,5 A (pour système C2S)
 - DC 16 V / 4 A
 - DC 19 V / 4 A
 - USB 5 V / 1,2 A
- ▶ Capacité : 30000 mAh



Désignation

Référence

Batterie amovible C2S BAT®

2CPROBAT


Aiguillettes

Désignation

Référence

Boîte de 20 blisters d'aiguillettes

2CPINS

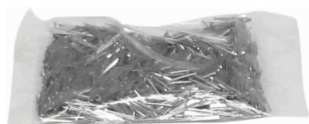

Bols de nettoyage

- ▶ Dim : Ø 11 x H. 9,5 cm
- ▶ Homologation : CE
- ▶ Chaque bol est livré avec une étiquette nominative, un protège étiquette et blister d'aiguillettes



Désignation

Référence

2 bols avec couvercle rose

2CBOLRM

Comprimés de bicarbonate

- ▶ Comprimés effervescents à usage quotidien
- ▶ Composition :
 - Bicarbonate de sodium
 - Vinaigre de cidre
 - Arôme menthe thym
 - Stéarate de magnésium
 - Cellulose microcristalline
 - Colorant bleu (E133)



Désignation

Référence

Boîte de 200 comprimés C2S TAB®

2CTAB

Solution détartrante

- ▶ Détartre, détache et nettoie en profondeur tous types de prothèses
- ▶ Composition : 15 – 30 % d'acide inorganique (d'acide phosphorique)
- ▶ Bouteille de 1 litre
- ▶ Poids : 1,4 Kg



Désignation

Référence

Solution détartrante C2S CLEAN®
Neodisher® N Dental

2CCLEAN