

# Neop | Chariots de distribution 600 x 400

## Dispensation journalière des médicaments avec des piluliers et bacs nominatifs

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier (hauteur 80) et en aluminium (hauteur 100 et 120)
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Léger
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Personnalisable : identification des services sur demande



**Robuste**



**Hygiénique**



**Ergonomique**



**Personnalisable**

- 3 hauteurs\* : 80, 100 ou 120
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code
- Plusieurs choix d'intercalaires (glissières, parois) en fonction des aménagements intérieurs souhaités

**Option EasyMoove® : motorisation de chariot**

### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

**Rose magenta**

**Vert pomme**

**Bleu céleste**



\* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie «Données techniques »

# Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

## Chariots hauteur 100 cm

### DIN – 18 lits bacs H. 70

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 18 bacs tiroirs H. 70 L. 1/3 – coloris blanc
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



#### Référence

8YM64H100DIN18

### DIN – 24 lits bacs H. 110

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 24 bacs tiroirs H. 110 L. 1/6 – coloris blanc
- 5 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 1 rail (bas droit)
- 1 poubelle



#### Référence

8YM64H100DI24E1

### DIN – 24 lits bacs H. 70

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 24 bacs tiroirs H. 70 L. 1/4 – coloris blanc
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle




#### Référence

8YM64H100DIN24

### DIN – 24 lits bacs H. 150

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm pour 60 gobelets
- 50 gobelets transparents avec couvercle
- 50 gobelets bleus avec couvercle
- 24 bacs tiroirs L. 1/6 H. 150 mm
- 5 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 rail (bas droit)
- 1 poubelle

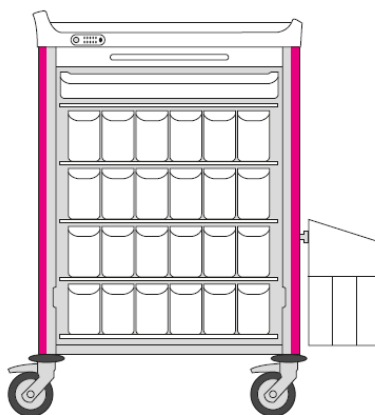

#### Référence

8YM64H100DI24E2

### DIN – 28 lits bacs H. 70

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 28 bacs tiroirs H. 70 L. 1/4 – coloris blanc
- 8 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



#### Référence

8YM64H100DIN28

### PDA PILI – 70 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 lots de 10 calages PILI
- 7 plateaux 600 x 400 nu pour piluliers Pili
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle




#### Référence

8YM64H100PIL70

### PDA MODULO CLASSIC – 70 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 7 plateaux 600 x 400 de 10 piluliers Modulo Classic
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle

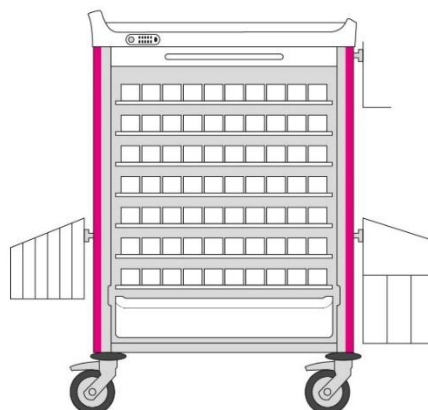

#### Référence

8YM64H100MC70

### PDA DÉVIDOIR – 24 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 24 bacs tiroirs H110 L.1/6 + dévidoir + curseur
- 5 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



#### Référence

8YM64H100DEV24

### PDA DÉVIDOIR – 30 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 30 bacs tiroirs H. 110 L. 1/6 + dévidoir + curseur
- 6 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



#### Référence

8YM64H100DEV30

## PDA DÉVIDOIR – 42 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 42 bacs tiroirs H. 70 L. 1/6 + dévidoir + curseur
- 8 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



### Référence


8YM64H100DEV42

## Chariots hauteur 120 cm

### DIN – 36 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm pour 60 gobelets
- 50 gobelets transparents avec couvercle
- 50 gobelets bleus avec couvercle
- 36 bacs tiroirs L. 1/6 H. 110 mm
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 155 mm avec séparateurs
- 1 rail (en bas à droite)
- 1 poubelle

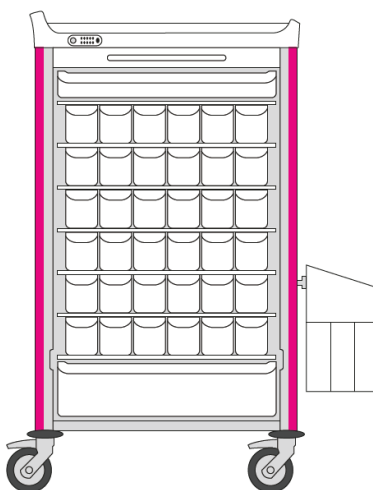


### Référence

8YM64H100DI36E1

### PDA DÉVIDOIR – 36 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 36 bacs tiroirs H. 110 L. 1/6 + dévidoir + curseur
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle

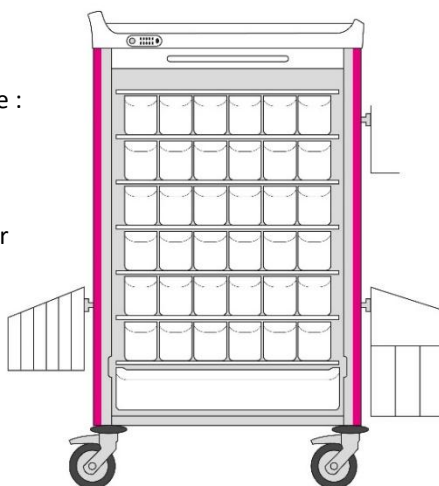


### Référence

8YM64H120DEV36

## PDA DÉVIDOIR – 42 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 42 bacs tiroirs L. 1/6 H. 110 mm + dévidoir + curseur
- 8 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle

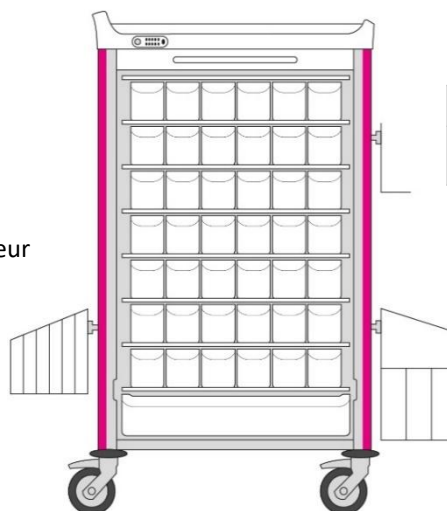

### Référence

8YM64H120DEV42

## PDA DÉVIDOIR – 54 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 54 bacs tiroirs H. 70 L. 1/6 + dévidoir + curseur
- 10 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



### Référence

8YM64H120DEV54

## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.

Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### Chariots hauteur 80 cm


Référence	Désignation
8YCHM164H80FR	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette thermoplastique + rideau + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80CFR	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette compact + rideau + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80FRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette thermoplastique + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80CFRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

## Chariots hauteur 100 cm

### CHARIOT AVEC RIDEAU MANUEL

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

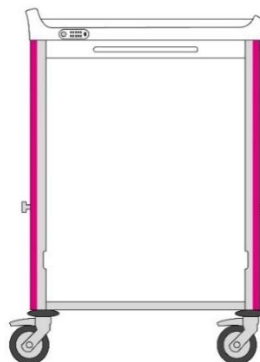


Référence	Désignation
8YCHM164H100FRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P40 + rideau + code + 3 rails avec intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHMH100FRC_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P62 + rideau + code + 3 rails avec intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

### CHARIOT AVEC SYSTÈME DE MOTORISATION EASYMOOVE®

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 3 rails (haut intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)
- Système de motorisation

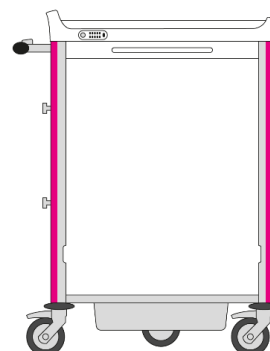


Référence	Désignation
8YCHM164H100_RCM	Chariot NEOP Basic 600x400 H100 motorisé rideau + code + 3 rails + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H100P6_RCM	Chariot NEOP Basic 600x400 H100 motorisé rideau + code + 3 rails + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

### CHARIOT AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 poignée ergonomique
- 3 rails (haut intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)

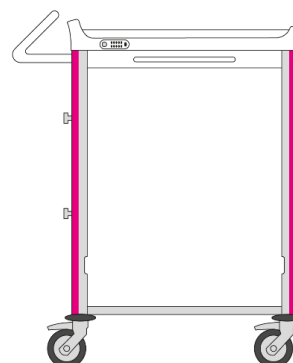


Référence	Désignation
8YCHM164H100_RCP	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 rideau + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H100P6_RCP	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 rideau + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

## CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION COULISSANTE

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension coulissante

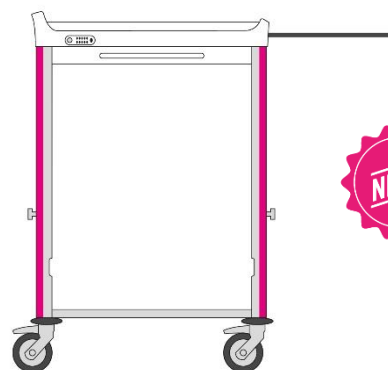

Référence	Désignation
8YCHM164H100RCTC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 + rideau + serrure code + tabl. coulissante + 2 rails avec intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCMH100FRCTC_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P62 + rideau + code + tabl. coulissante + 2 rails avec intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

## CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable



Référence	Désignation
8YCHM164H100RCT	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 + rideau + serrure code + tabl. rab. + 2 rails avec intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCMH100FRCT_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P62 + rideau + code + tabl. rab. + 2 rails avec intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)




## Chariots hauteur 120 cm

### CHARIOT AVEC TABLETTE SUPÉRIEURE EN COMPACT

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en stratifié compact
- Fermeture à rideau
- Serrure à code

Référence	Désignation
8Y164H120P6C_RC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P62 + rideau + serrure code + tabl. compact

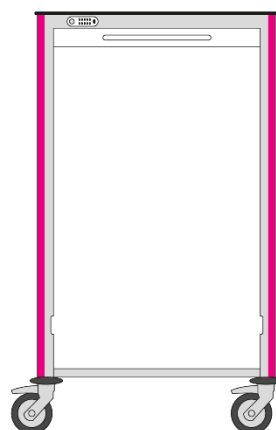


### CHARIOT AVEC TABLETTE SUPÉRIEURE EN THERMOPLASTIQUE

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

Référence	Désignation
8YCHM164H120FRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P40 + rideau + serrure code + 3 rails
8YCHMH120FRC_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P62 + rideau + serrure code + 3 rails

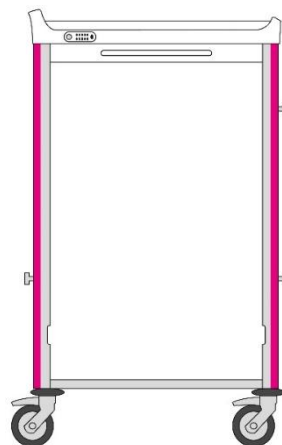


### CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable

Référence	Désignation
8YCHM164H120RCT	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P40 + rideau + serrure code + tabl. rab. + 2 rails
8YCMH120FRCT_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P62 + rideau + serrure code + tabl. rab. + 2 rails

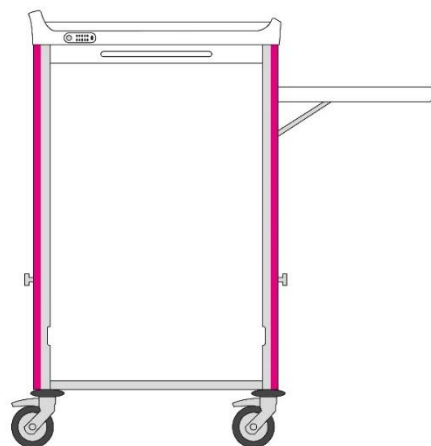




# Composition sur mesure

## ÉTAPE 1 - Structure du chariot

Les références suivantes comprennent le caisson, les roues et les intercalaires ou parois.

	Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*
Intercalaires standards pour tiroirs standards (pas de 40 mm)	8Y164H80P4	8Y164H100P4	8Y164H120P4
Parois pour tiroirs télescopiques	-	8Y164H100T	8Y164H120T
Intercalaires standards pour piluliers Adhésia Equipements (pas de 40 mm)	-	8Y164H100W	8Y164H120W

## ÉTAPE 2 - Personnalisation du chariot

			Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*
1	Tablette supérieure	en thermoplastique avec découpe serrure	8Y001_6400TH		
		en thermoplastique avec découpe serrure compatible avec tablette coulissante	-	8Y001_6400TC	-
		en thermoplastique sans découpe serrure	8Y001_6400THSP		
		en thermoplastique sans découpe serrure compatible avec tablette coulissante	-	8Y001_6400TCSP	-
		en stratifié compact	8Y001_6400CP1		
2	Fermeture	rideau manuel pour intercalaires standards	8Y002_6008F3	8Y002_6010F3	8Y002_6012F3
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2	8Y002_0010F2
		battant pour intercalaires standards	8Y002_0008F1	8Y002_0010F1	-
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	8Y003CODE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003CODE1		
4	Couleur	Rose magenta 	8Y004_0008RM	8Y004_0010RM	8Y004_0012RM
		Vert pomme 	8Y004_0008VP	8Y004_0010VP	8Y004_0012VP
		Bleu céleste 	8Y004_0008BC	8Y004_0010BC	8Y004_0012BC
5	Marquage spécifique		8Y132		
6	Motorisation de chariot EasyMoove		-	9R002_L01	9R002_L01

\* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

## Options, accessoires latéraux et aménagements intérieurs

### Motorisation de chariot EasyMoove®

- Poussée 100 % motorisée
- Limite les efforts de poussée pour les utilisateurs
- Réduit le risque de troubles musculo-squelettiques



### Tablette d'extension, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroirs...



# Données techniques

## Chariot avec tablette supérieure en plastique thermoformé

### Dimensions hors tout du chariot



### Dimensions utiles du plan de travail



Zone de préhension ergonomique

### Hauteur du plan de travail

H 120 : 1297 mm  
H 100 : 1057 mm  
H 80 : 897 mm

## Chariot avec tablette supérieure en stratifié compact

### Dimensions hors tout du chariot



### Dimensions utiles du plan de travail



### Hauteur du plan de travail

H 120 : 1304 mm  
H 100 : 1064 mm  
H 80 : 904 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.  
La profondeur intègre par défaut une serrure.

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy H 80 : Acier (électro-zingué) / H 100 : Aluminium / H 120 : Aluminium
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA OU stratifié compact ép. 10 mm
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture époxy
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot		
<b>Poids à vide</b>	H 80 : 27 kg	H 100 : 24 kg	H 120 : 26 kg
<b>Capacité</b>	<b>H 80 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 15 pas pour chariot avec rideau - 16 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant	<b>H 100 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 19 pas pour chariot avec rideau - 20 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant  <b>H 100 avec intercalaires à encombrement optimisé (62 mm) :</b> - 11 pas pour chariot avec rideau - 12 pas pour chariot sans rideau  <b>H 100 avec parois pour tiroirs télescopiques : 10 tiroirs H 80 mm</b>	<b>H 120 avec intercalaires standards (40 mm) :</b> - 25 pas pour chariot avec rideau - 26 pas pour chariot sans rideau  <b>H 120 avec parois pour tiroirs télescopiques : 13 tiroirs H 80 mm</b>
<b>Verrouillage</b>	Serrure à code (avec clé de secours)		

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	H 80 : 39 kg H 100 : 36 kg H 120 : 38 kg
<b>Dimensions</b>	H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m H 100 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m H 120 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,60 m
<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>