

Approvisionnement des médicaments ou des dispositifs médicaux

- Robuste : excellente résistance, armature de transport anti-torsion en acier traité poudre apprêt + polyester
- Ergonomique : sanglage camion au niveau des 4 angles sur les emplacements dédiés, ou à tous niveaux à l'extérieur de l'armature de transport
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Hauteur* 120
- Fermeture à rideau
- Verrouillage par serrure à code

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie «Données techniques»

Configurations types - BASIC

Référence	Désignation
8Y164H120P4.TR_RC	Chariot de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H120 avec rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCT120FRC_ED2	Chariot de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H120 avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

Composition sur mesure

ÉTAPE ① - Structure du chariot

Chariot hauteur 120 cm* Pas de 40 mm
8Y164H120P4.TR_V2

Cette référence comprend :

- le caisson
- l'armature de transport
- les roues
- les intercalaires

ÉTAPE ② - Personnalisation du chariot

Sélection obligatoire des éléments 1 à 3

Chariot hauteur 120 cm*		
1	Fermeture à rideau	8Y002_6012F3
2	Serrure à code	8Y003CODE3
3	Couleur	Rose magenta
		8Y004_0012RM
		Vert pomme
		8Y004_0012VP
		Bleu céleste
		8Y004_0012BC

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie « Données techniques »

ÉTAPE ③ - Options

	Référence
Timon attelage rabattable sans crochet	8Y041
Crochet d'attelage timon	8Y042


Accessoires et aménagements intérieurs

Tiroirs, bacs à lèvres, kit de compartimentage...



Données techniques

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.
La profondeur intègre par défaut une serrure.

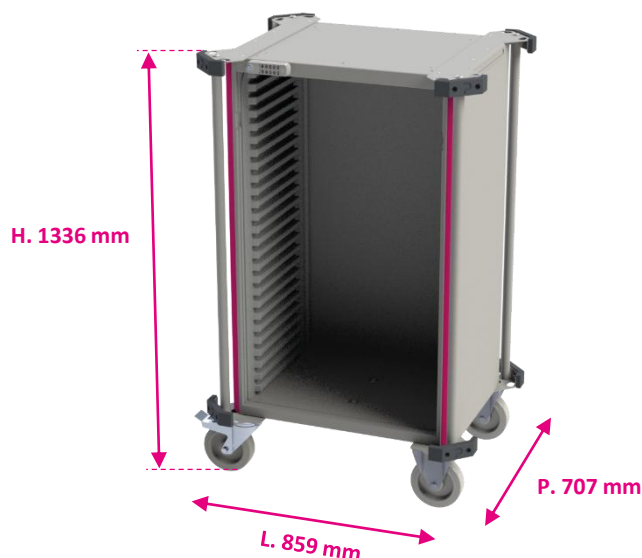

Matières

Structure	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
Armature	Acier mécano-soudé traité poudre apprêt + polyester
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
Roues	Bandage en caoutchouc semi élastique - Chape acier embouti
Pare-chocs	4 coins en caoutchouc

Informations diverses

Roues	Diamètre 160 mm - 4 roues pivotantes (2 à frein et 2 directionnelles)
Poids à vide (armature + caisson)	52 kg
Capacité	24 pas de 40 mm pour une armoire avec un rideau 15 pas de 62 mm pour une armoire avec un rideau
Verrouillage	Code (avec clé de secours)
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions	L. 0,88 x P. 0,80 x H. 1,6 m
Poids (structure + emballage)	64 kg	Volume	1,13 m ³